



SoloSTAR

دفترچه راهنمای سریع

برای شما تجویز شده است که لانتوس و یا آپیدرا را
در یک قلم انسولین سولواستار تزریق کنید. می
توانید همزمان سطح دوز را از ۱ تا ۸۰ واحد در
درجات ۱ واحدی تنظیم کنید.

دفترچه راهنمای سریع حاوی اطلاعاتی در
مورد نحوه استفاده از سولواستار است. جزئیات
بیشتر را می توانید در دستورالعمل های ارائه شده
به همراه بسته بندی سولواستار دریافت کنید.
همچنین می توانید در هر زمان و روز
دلخواه

سولواستار و قسمت های تشکیل دهنده آن



سوزنهای زیر برای استفاده با سولواستار توصیه می شوند:

BD MicroFine+ (فشاری و پیچی)

Artsana Insupen (فشاری و پیچی)

Ypsomed PenFine (فشاری)

Owen Mumford Unifine Pentips

(فشاری و پیچی)

هر سولواستار حاوی
۳۰۰ واحد انسولین است.

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت
www.insulin.se مراجعه کنید.

نحوه شروع به کار

انجام تست ایمنی قبل از هر تزریق

۱ بررسی کنید که

انسولین درست را انتخاب کرده باشید.

سولواستار لانتوس، خاکستری رنگ است که یک دکمه تزریق ارغوانی رنگ دارد. سولواستار آپیدرا، آبی است و یک دکمه تزریق سرمه ای رنگ دارد.

درپوش قلم را برداشته و بررسی کنید که انسولین شفاف باشد.



۲ سوزن را به عایق

لاستیکی وصل کرده،

مطمئن شوید که با قلم

در یک ردیف قرار



گرفته باشد. پیچاندن یا

ضربه زدن به سوزن


بستگی به این دارد که

از کدام سوزن استفاده


می کنید.

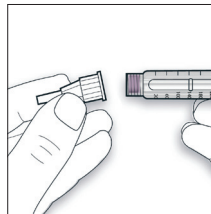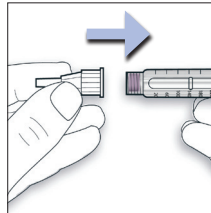


۳ با چرخاندن پیچ گردان دوز در جهت عقربه های ساعت یک دوز ۲ واحدی انتخاب کنید. سرپوش های خارجی و داخلی سوزن را بردارید.

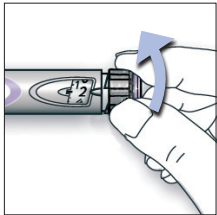

۴ قلم را طوری نگهدارید که سوزن آن به سمت بالا باشد. با ضربه زدن به مخزن انسولین حباب های موجود در آن را تخلیه کنید.

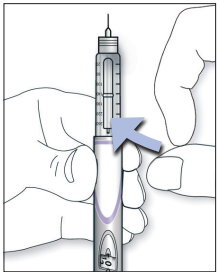


۵ دکمه تزریق را به داخل فشار دهید. بررسی کنید که انسولین از نوک سوزن بیرون بیاید و درپچه دوز، "۰" را نمایش دهد.

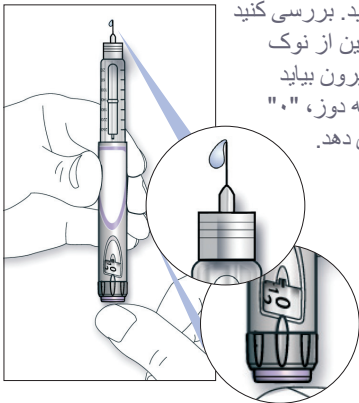

تنظیم دوز و تزریق

پس از تزریق


۱

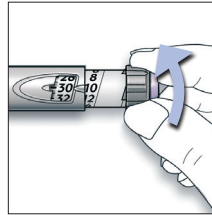

دوز انتخاب شده را تنظیم کنید. اگر پیچ گردان دوز را به قبل از واحد مورد نظر جهت تزریق چرخانید، آن را مجدداً به واحد صحیح برگردانید.



۲

دوز مورد نظر را طبق دستور پرستار یا دکتر خود تزریق کنید. سوزن را به پوست خود چسبانده و دکمه تزریق را تا انتها به داخل فشار دهید. هنگام تزریق، شماره نشان داده شده بر روی دریچه دوز کم می شود تا به "۰" برسد.

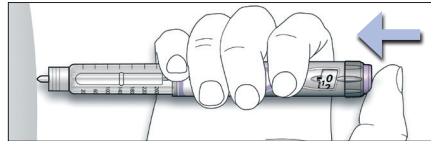


۳

دکمه تزریق را به مدت ۱۰ ثانیه به داخل فشار دهید سپس سوزن را بیرون بکشید.

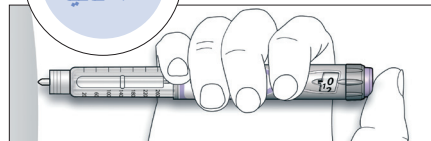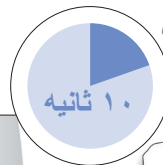


۱۰ ثانیه

۴

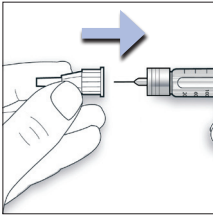

درپوش خارجی سوزن را گذاشته و سوزن را بپایانده و باز کنید. سوزن را طبق دستورالعمل دور ببندازید. اگر از درپوش داخلی سوزن استفاده نکنید از جراحات به وجود آمده در اثر فرو رفتن تصادفی سوزن اجتناب می شود. درپوش قلم را روی سولواستار قرار داده و آن را در مکان مناسبی قرار دهید.

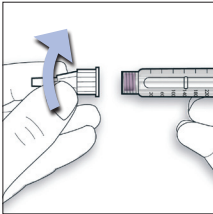

NB

همیشه پس از تزریق، سوزن را بیرون آورده تا سولواستار را بدون سوزن نگهداری کنید. با این کار از آلودگی، ایجاد حباب های هوا و نشأت انسولین جلوگیری می شود.

نکات و نظرات

اگر نمی توانید دوز مورد نیاز را تنظیم کنید، بررسی کنید که انسولین کافی در مخزن انسولین وجود داشته باشد. اگر به میزان کافی انسولین در سولواستار شما باقی نمانده است، می توانید یکی از کارهای زیر را انجام دهید:

- تعداد واحد انسولین باقیمانده در سولواستار را استفاده کرده و بقیه دوز را از یک سولواستار جدید تزریق کنید، یا
- دوز کامل را از یک سولواستار جدید تزریق کنید.

نگهداشتن دکمه به سمت داخل

ممکن است پس از اینکه دکمه تزریق را فشار دادید انسولین برای مدت کوتاهی از سوزن چکه کند. باید دکمه را ۱۰ ثانیه به داخل فشار دهید تا مطمئن شوید که دوز کامل را تزریق کرده اید.

طرز نگهداری از سولواستار

همیشه یک سولواستار اضافی نزد خود داشته باشید زیرا ممکن است سولواستار مصرفی شما گم شده یا به هر دلیلی بشکند.

قبل از استفاده

تا زمانی که نمی خواهید از سولواستار استفاده کنید آن را در یخچال نگهداری کنید. هنگامی که یک سولواستار جدید را از یخچال بیرون می آورید، باید به مدت ۱ تا ۲ ساعت قبل از استفاده آن را در محیط اتاق قرار دهید.

هنگام مصرف

هنگامی که سولواستار را از یخچال بیرون آوردید، انسولین می تواند به مدت ۲۸ روز استفاده شود. در طول این مدت، می توانید سولواستار را در دمای محیط نگهدارید در صورتی که دمای اتاق بیشتر از ۲۵ درجه نباشد. سولواستار را در یخچال یا بسته های خنک قرار ندهید.

سولواستار خود را در هر مکانی رها نکنید زیرا ممکن است بیش از حد گرم شود. سولواستار را از نور خورشید دور نگهدارید.

پس از ۲۸ روز سولواستار خود را دور بیندازید چه انسولین در آن باقیمانده باشد چه نباشد.

پس از تاریخ انقضای حک شده بر روی قلم یا جعبه از سولواستار استفاده نکنید.

اگر لازم است که قسمت بیرونی سولواستار خود را تمیز کنید، می توانید از یک پارچه نمدار استفاده کنید. سولواستار را در آب فرو نبرده یا آن را نشوید و از صابون یا حلال ها برای تمیز کردن آن استفاده نکنید.

اگر هر گونه سوالی در مورد سولواستار دارید، با خط ۲۴ ساعته راهنمای ما به شماره تلفن ۸۷ ۶۸ ۰۲۰- تماس حاصل کنید.

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

www.insulin.se

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد دیابت به سایت www.insulin.se مراجعه کنید
همچنین می توانید در سایت www.fass.se در مورد انواع مختلف انسولین مطالعه کنید

sanofi aventis

Because health matters

سانوفی اونتیس ا ب (sanofi-aventis AB)، صندوق پستی ۱۴۱۴۲، ۱۴۱۶۷ Bromma، تلفن: ۰۸ - ۶۳۴ ۵۰ ۰۰
www.sanofi-aventis.se